



НАКЛАДАННЯ ТУРНИКЕТУ З ВОРОТКОМ І ПРЯЖКОЮ ДВОМА РУКАМИ ДОПОМОГА У ЗОНІ ОБСТРІЛУ (CUF)

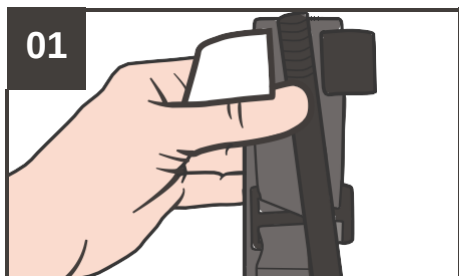

01 **ДІСТАНЬТЕ** турнікет з JFAK чи підсумка.

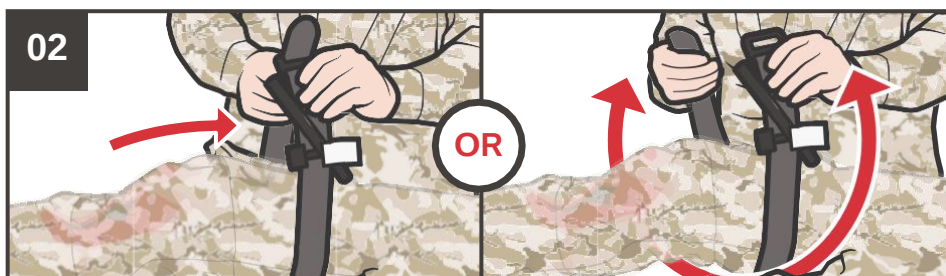

02 **ПРОТЯГНІТЬ** уражену кінцівку крізь петлю ременю турнікету із самоклеючою стрічкою.

ПРОВЕДІТЬ ремінь навколо кінцівки та через пряжку джгута.



03 **НАКЛАДІТЬ** турнікет над місцем кровотечі, високо на кінцівці, поверх одягу/уніформи.



04 **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що ремінь щільно протягнутий крізь пряжку перед затягуванням турнікету та закручуванням воротка.




05 **TWIST** the windlass rod until bleeding has stopped (*complete steps 1-5 in under 1 min*).



06 **ЗАКРІПІТЬ** вороток у належному місці за допомогою затискача.



07 **ПРОВЕДІТЬ** ремінь із самоклеючою стрічкою через вороток та між затискачами.

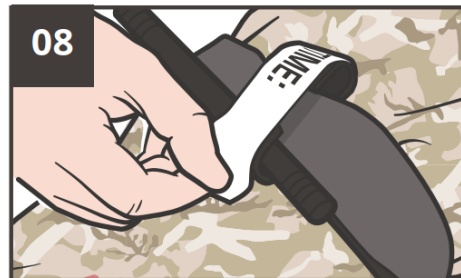

08 **ЗАКРІПІТЬ** все, використовуючи безпекову стрічку.



09 Якщо немає ознак іншої масивної кровотечі, **ПЕРЕВЕДІТЬ ПОСТРАЖДАЛОГО В УКРИТТЯ.**