

ТЕХНІКА НАКЛАДАННЯ ДЖГУТА З ХРАПОВИМ (ІЗ ЗУБЧАСТИМ) МЕХАНІЗМОМ БЛОКУВАННЯ ДВОМА РУКАМИ.

ДОПОМОГА В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ (TFC)



01
ЗАБЕЗПЕЧТЕ ДОСТУП до рани та
ОЦІНІТЬ її стан.



02
ДІСТАНЬТЕ турнікет з
індивідуальної аптечки/ підсумку.




03a
ПРОСУНЬТЕ уражену кінцівку через
петлю, яку утворює ремінь турнікету.




03b
ОБГОРНІТЬ ремінь навколо
кінцівки та просуньте крізь пряжку.



04
РОЗМІСТІТЬ турнікет на 5-8 см
вище місця поранення безпосеред-
ньо на шкірі.

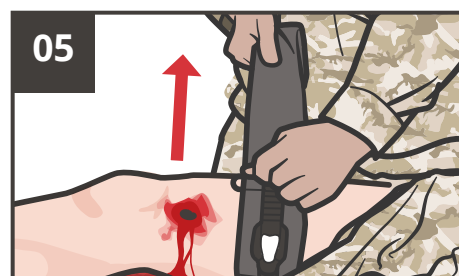

05
Макимально сильно НАТЯГНІТЬ
ремінь турнікету, не залишаючи
зазорів.

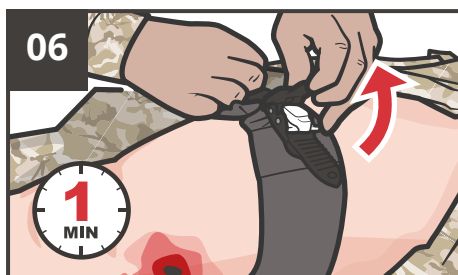


06
ЗАТЯГНІТЬ зубчастий механізм
якомога міцніше, доки кровотеча не
буде зупинена (завершіть кроки 1-6
впродовж 1 хв).




07
ЗАФІКСУЙТЕ зубчастий механізм,
почувши характерний «кляцаючий»
звук.



08
ОГОРНІТЬ залишки ремня навколо
зубчастого механізму та ЗАКРІПІТЬ їх.

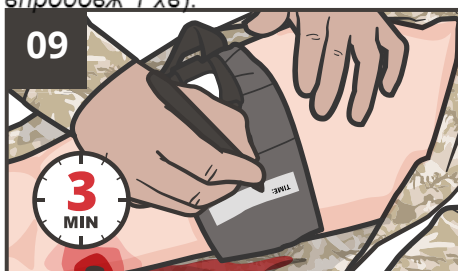

09
ПОЗНАЧТЕ час накладання
турнікету на реміні.

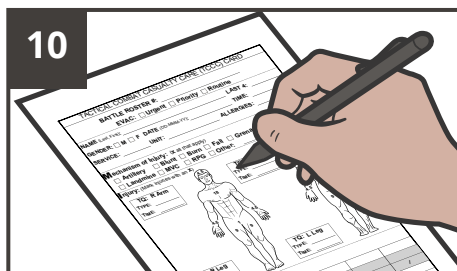

10
ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ надану
допомогу в Картці пораненого TCCC
та прикріпіть її до одягу потерпілого.