




СИСТЕМА EZ-IO® ДЛЯ ВНУТРІШНЬОКІСТКОВОГО ВВЕДЕННЯ У ВЕЛИКОГОМІЛКОВУ КІСТКУ



ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.

ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.

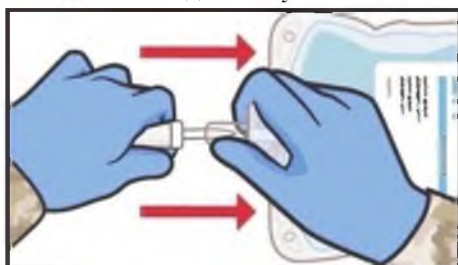

02 ПІД'ЄДНАЙТЕ контейнер/пакет з розчином для внутрішньовенної (ВВ) інфузії до належно підготовленої системи для ВВ інфузій.



03 ЗАПОВНІТЬ подовжку вач для внутрішньокісткового (ВК) катетера стерильним розчином для ВВ ін'єкцій, дотримуючись правил асептики.

01 ЗБЕРІТЬ, ПІДГОТУЙТЕ та ПЕРЕВІРТЕ необхідне обладнання.



04 ВИЗНАЧТЕ потрібне місце для введення пристрою EZ-IO - на ширину одного пальця медіальніше від проксимальної частини горбистості великогомілкової кістки (зазвичай на 3 см нижче від надколінника).




05 ПРОТРИТЬ ділянку серветкою, змоченою спиртом або повідон-йодом.




06 ВІЗЬМІТЬ відповідний картридж EZ-IO. Якщо використовується механічний дріль, відкрийте картридж EZ-IO та приєднайте голку до дреля. Ви повинні відчути характерне клацання при під'єднанні малого магніту.

ПРИМІТКА: Картридж EZ-IO для дорослих має жовтий колір.

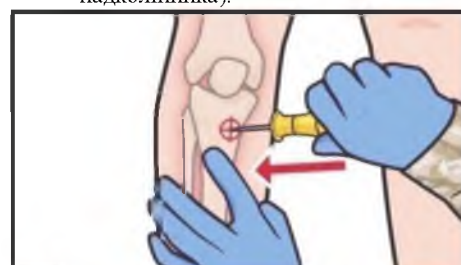

07 ПІДГОТУЙТЕ голку EZ-IO для ручного введення, знявши захисний ковпачок. Якщо ви використовуєте механічний дріль, зніміть ковпачок швидким включенням дреля, утримуючи ковпачок.

ПРИМІТКА: Тримайте руки та пальці подалі від голки.

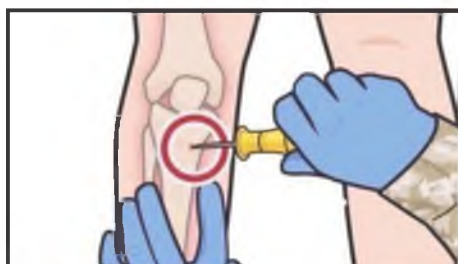


08 Тримавши дріль або голку в домінуючій руці, другою рукою **ЗАФІКСУЙТЕ** ногу біля місця введення не домінуючою рукою.



10 ПРОКОЛІТЬ шкіру та просувайте голку, поки її кінчик не торкнеться до кістки.

11 Докладаючи рівномірного постійного тиску вниз, прокрутите голку рухами туди й назад (або натискайте на пусковий механізм дреля), поки голка не пройде крізь кортикальний шар кістки.

ПРИМІТКА: При досягненні потрібної глибини ви відчуєте втрату опору або легенький звук.

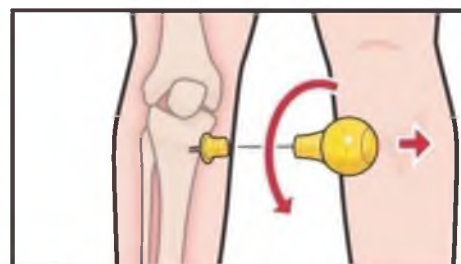

12 ВІДКРУТІТЬ стилет проти годинникової стрілки та зніміть його з ВК катетера. Якщо використовувався механічний дріль, обережно від'єднайте його.

Продовження на наступній сторінці...

СИСТЕМА EZ-IO® ДЛЯ ВНУТРІШНЬОКІСТКОВОГО
ВВЕДЕННЯ У ВЕЛИКОГОМІЛКОВУ КІСТКУ

Продовження...




13 ПОМІСТІТЬ стилет у контейнер для гострих предметів.



14 ЗАФІКСУЙТЕ ВК катетер за допомогою стабілізатора EZ-IO, якщо він є в комплекті.


ПРИМІТКА: За відсутності стабілізатора зафіксуйте ВК катетер за допомогою об'ємної пов'язки і лейкопластиру, щоб запобігти зміщенню виступаючої частини подовжувача ВК катетера під час надання допомоги або переміщення пораненого.

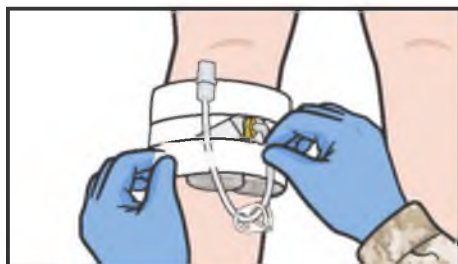


15 ПІД'ЄДНАЙТЕ заповнений ВВ розчином подовжувач. прямокутним кінцем до роз'єму Люер-Лок (Luer-Lock) ВК катетера.



16 Виконайте АСПІРАЦІЙНУ пробу, щоб переконатися, що голка знаходиться в кістковому мозку (повинен аспіруватися кров'янистий вміст). Промийте катетер 10 мл розчину методом швидкої інфузії.

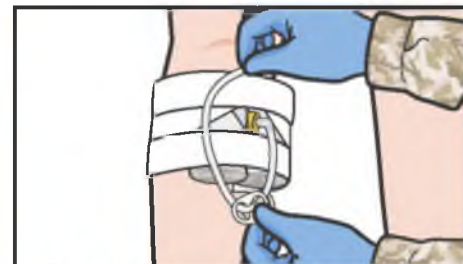

17 ОЦІНІТЬ на наявність ознак інфільтрації або ускладнень.

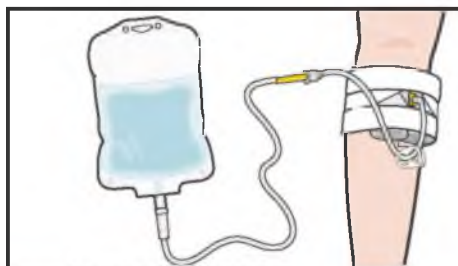

18 ПІДГОТУЙТЕСЯ до введення розчинів або медикаментів.



19 ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ всі результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.