

НАКЛАДАННЯ ТУРНИКЕТА З ВОРОТКОМ І ПРЯЖКОЮ ДВОМА РУКАМИ

ДОПОМОГА В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ (TFC)



ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.

ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.

01

РОЗКРИЙТЕ місце поранення та огляньте джерело кровотечі.

ПРИМІТКА: Можливо, вам прийдеться розрізати одяг, щоб належним чином оглянути рану.



02

ЗАСТОСУЙТЕ прямий тиск, щоб зупинити кровотечу.



03


ДИСТАНЬТЕ турнікет із тактичної індивідуальної аптечки пораненого та/або з підсумка.



04

ПРОСУНЬТЕ поранену кінцівку крізь петлю ремня турнікета (турнікет у вигляді замкнутої петлі).

ОБГОРНІТЬ ремінь навколо кінцівки і протягніть крізь отвір пряжки.

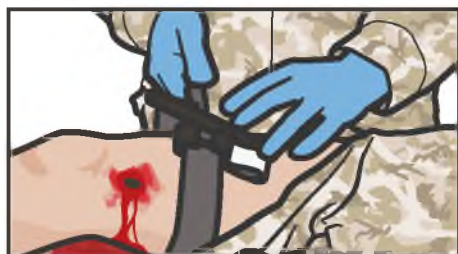

05

РОЗМІСТІТЬ турнікет на 5 - 8 см вище від рани безпосередньо на шкірі.




06

ЩІЛЬНО ЗАТЯГНІТЬ самоклеючу стрічку, аби усунути будь-які провисання.



07

ЗАФІКСУЙТЕ самоклеючу стрічку по всій довжині навколо кінцівки (але не над скобами, які фіксують вороток).

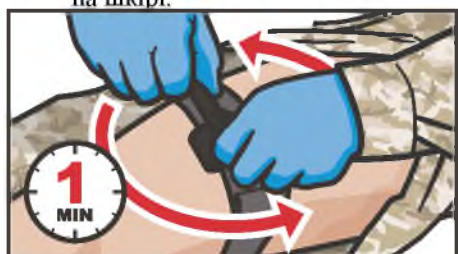

08

ЗАКРУЧУЙТЕ вороток до тих пір, поки кровотеча не зупиниться (Кроки 1-8 слід виконати менш ніж за 1 хв).



09

ЗАКРІПІТЬ вороток за допомогою фіксатора.



10

ОБГОРНІТЬ самоклеючу стрічку навколо воротка та між фіксуючими скобами.



11

ЗАКРІПІТЬ усе фіксуючою стрічкою.



12

ЗАПИШІТЬ час накладання турнікета на білій стрічці (чи лобі пораненого), завершивши виконання всього процесу за 3 хвилини.



13

ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 і прикріпіть до її до постраждалого.