


CLS  
TCCCСМС  
ТСССCPP  
TCCC

# НАКЛАДАННЯ ТУРНИКЕТА З ВОРОТКОМ І ПРЯЖКОЮ ДВОМА РУКАМИ

(ДОПОМОГА ПІД ВОГНЕМ, CUF)

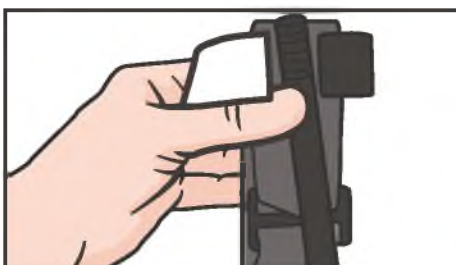

**01** Дістаньте турнікет з тактичної індивідуальної аптечки (JFAK) та/або підсумка.



**02a** Просуньте поранену кінцівку крізь петлю, яку утворює самоклеюча стрічка (турнікет у вигляді замкнутої петлі).

**02b** Обгорніть ремінь навколо кінцівки; просуньте його кінець крізь отвір пряжки.



**03** Розмістіть турнікет над місцем кровотечі, високо на кінцівці поверх одягу/уніформи.



**04a** Перед затягуванням турнікета та закручуванням воротка переконайтеся, що стрічка протягнута крізь пряжку без провисань.



**04b** Зафіксуйте самоклеючу стрічку по всій довжині навколо кінцівки, але не над скобами, які фіксують воріток.



**05** Закручіть воріток до тих пір, поки кровотеча не зупиниться (кроки 1-5 слід виконати менш, ніж за 1 хв).




**06** Закріпіть воріток за допомогою фіксатора.



**07** Проведіть самоклеючу стрічку навколо ворітка та між фіксуючими скобами.



**08** Закріпіть усе фіксуючою стрічкою.

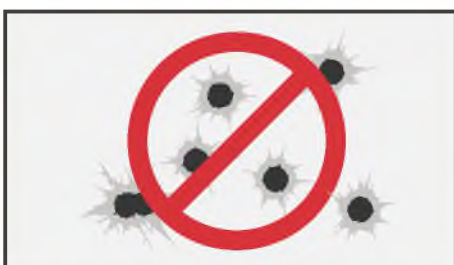

**09** Якщо відсутні ознаки інших масивних кровотеч, перемістіть пораненого в укриття.

**ПРИМІТКА:** Не документуйте час накладання турнікета до переходу в фазу Допомоги в польових умовах.