


НАКЛАДАННЯ ТИСНУЧОГО БАНДАЖА




ВИЙМІТЬ бандаж з
упакування.

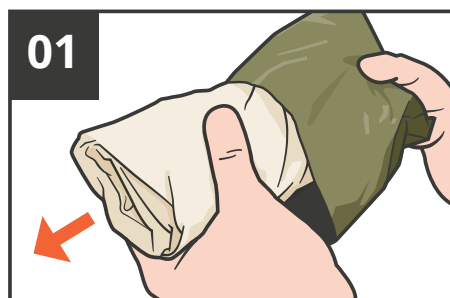

РОЗМІСТІТЬ подушку
бандажа безпосередньо над
раною, застосовуючи тиск.



ОГОРНІТЬ еластичний
бандаж навколо кінцівки,
утримуючи тиск.

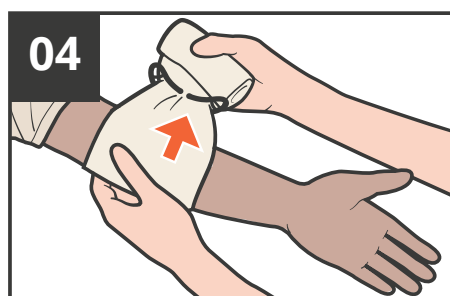

ПРОТЯГНІТЬ бинт крізь
пластиковий елемент тиску.




Почніть огортати бандаж
навколо кінцівки у **ЗВОРОТ-
НЬОМУ НАПРЯМКУ** поверх
пластикового елемента тиску.




Міцно **ОГОРНІТЬ** бандаж
навколо пластикового
елемента
тиску доки повністю не



ЗАКРІПІТЬ гачок фіксуючого
елемента за один з обертів
бандажа.

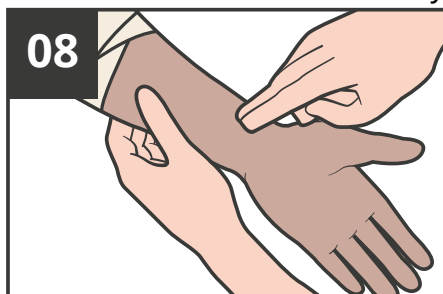

ОЦІНІТЬ кровообіг під
пов'язкою, перевіривши
пульс нижче поранення; за
потреби – послабте бандаж.

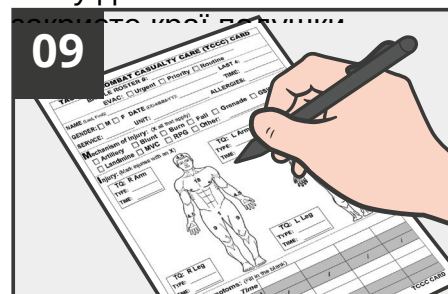

ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ надану
допомогу у Картці пораненого
TCCC.



ПОВІДОМТЕ медичний
персонал про надану
допомогу.