


СИСТЕМА EZ-IO® ДЛЯ ВНУТРІШНЬОКІСТКОВОГО  
ВВЕДЕННЯ У ВЕЛИКОГОМІЛКОВУ КІСТКУ

**ПОДБАЙТЕ** про засоби індивідуального захисту.

**ПРИМІТКА:** Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.

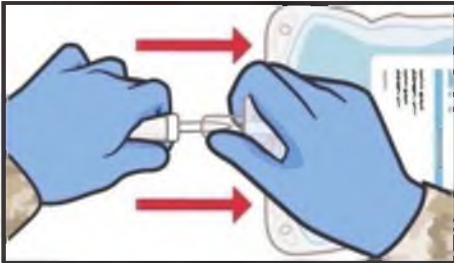

**02 ПІД'ЄДНАЙТЕ** контейнер/пакет з розчином для внутрішньовенної (ВВ) інфузії до належно підготовленої системи для ВВ інфузій.



**03 ЗАПОВНІТЬ** подовжувач для внутрішньокісткового (ВК) катетера стерильним розчином для ВВ ін'єкцій, дотримуючись правил асептики.

**01 ЗБЕРІТЬ, ПІДГОТУЙТЕ та ПЕРЕВІРТЕ** необхідне обладнання.




**04 ВИЗНАЧТЕ** потрібне місце для введення пристрою EZ-IO - на ширину одного пальця медіальніше від проксимальної частини горбистості великогомілкової кістки (зазвичай на 3 см нижче від надколінника).



**05 ПРОТРИТЬ** ділянку серветкою, змоченою спиртом або повідон-йодом.




**06 ВІЗЬМІТЬ** відповідний картридж EZ-IO. Якщо використовується механічний дріль, відкрийте картридж EZ-IO та приєднайте голку до дреля. Ви повинні відчути характерне клацання при під'єднанні малого магніту.

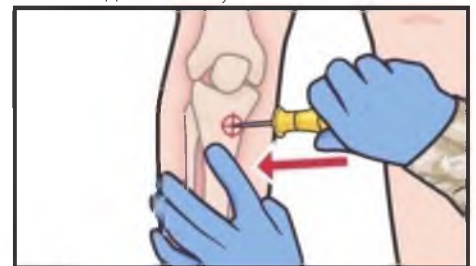

**07 ПІДГОТУЙТЕ** голку EZ-IO для ручного введення, знявши захисний ковпачок. Якщо ви використовуєте механічний дріль, зніміть ковпачок швидким включенням дреля, утримуючи ковпачок.

**ПРИМІТКА:** Картридж EZ-IO для дорослих має жовтий колір.


**ПРИМІТКА:** Тримайте руки та пальці подалі від голки.

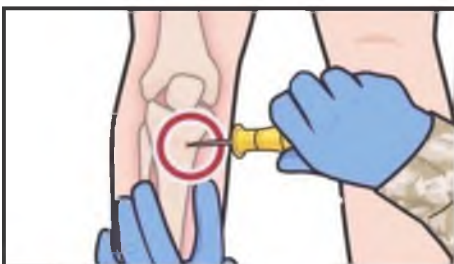

**08** Тримайте дріль або голку в домінуючій руці, другою рукою **ЗАФІКСУЙТЕ** ногу біля місця введення не домінуючою рукою.



**10 ПРОКОЛІТЬ** шкіру та просувайте голку, поки її кінчик не торкнеться до кістки.

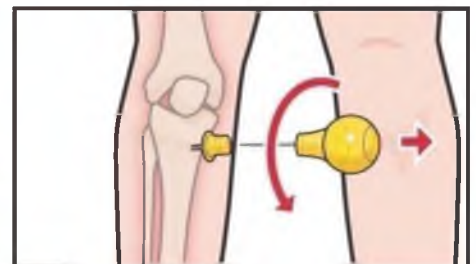

**12 ВІДКРУТІТЬ** стилет проти годинникової стрілки та зніміть його з ВК катетера. Якщо використовувався механічний дріль, обережно від'єднайте його.

**09 РОЗМІСТІТЬ** дріль або голку над місцем введення під кутом 90 градусів до площини кістки.

**11** Докладаючи рівномірного постійного тиску вниз, прокрутите голку рухами туди й назад (або натискайте на пусковий механізм дреля), поки голка не пройде крізь кортикальний шар кістки.

**ПРИМІТКА:** При досягненні потрібної глибини ви відчуєте втрату опору або легенький звук.


Продовження на наступній сторінці...

## СИСТЕМА EZ-IO® ДЛЯ ВНУТРІШНЬОКІСТКОВОГО ВВЕДЕННЯ У ВЕЛИКОГОМІЛКОВУ КІСТКУ

Продовження...




**13** **ПОМІСТІТЬ** стилет у контейнер для гострих предметів.

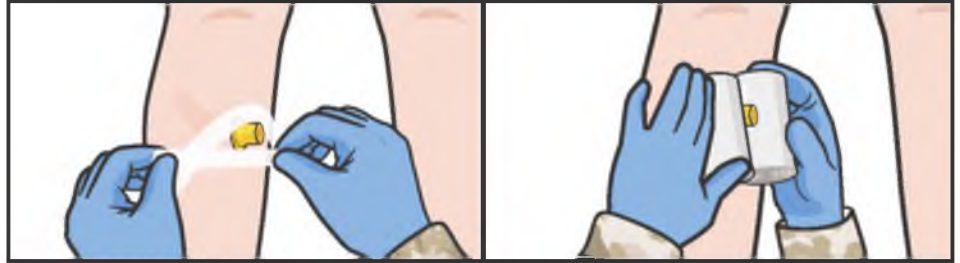


**14** **ЗАФІКСУЙТЕ** ВК катетер за допомогою стабілізатора EZ-IO, якщо він є в комплекті.


**ПРИМІТКА:** За відсутності стабілізатора зафіксуйте ВК катетер за допомогою об'ємної пов'язки і лейкопластиру, щоб запобігти зміщенню виступаючої частини подовжувача ВК катетера під час надання допомоги або переміщення пораненого.

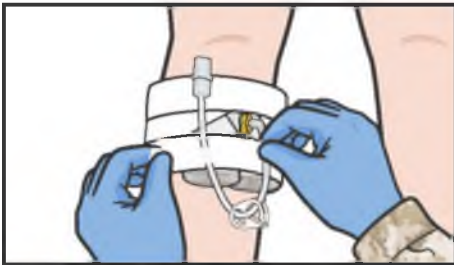


**15** **ПІД'ЄДНАЙТЕ** заповнений ВВ розчином подовжувач. прямокутним кінцем до роз'єму Люер-Лок (Luer-Lock) ВК катетера.

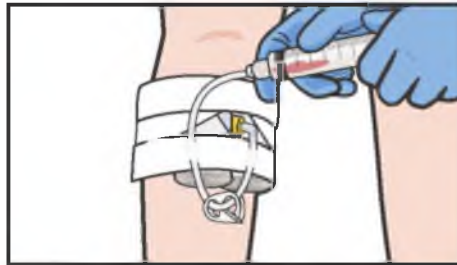

**16** Виконайте **АСПІРАЦІЙНУ** пробу, щоб переконатися, що голка знаходиться в кістковому мозку (повинен аспіруватися кров'янистий вміст). Промийте катетер 10 мл розчину методом швидкої інфузії.

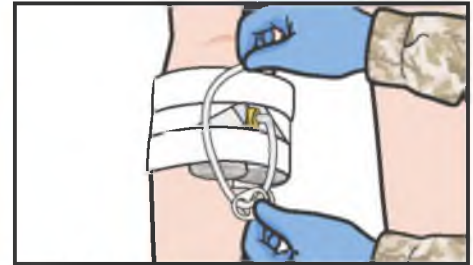

**17** **ОЦІНІТЬ** на наявність ознак інфільтрації або ускладнень.

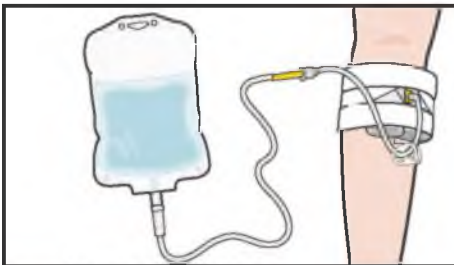

**18** **ПІДГОТУЙТЕСЯ** до введення розчинів або медикаментів.



**19** **ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ** всі результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.